

Stephen H Freedom – Standard

Se sentir libre comme à la maison



FAUTEUIL

Usage fréquent

Chimiothérapie

Thérapie par perfusion

Hôpital de jour

Don de sang

Prises de sang

Urgences

Dialyse

Transport de patients

Dermatologie/Cosmétique

Polyfonctionnels



MOUVEMENT DES ACCOUDOIRS SOLIDAIRE DU DOSSIER



**SUPPORT TÉLÉCOMMANDE BILATÉRALE
CODE FOURNITURE AC25P**

Avantages

- Châssis anti-renversement qui assure la stabilité dans toutes les conditions de fonctionnement.
- Châssis peint avec des poudres époxy thermodurcissables enrichies en antibactérien avec une large gamme de couleurs. Personnalisation de la couleur comme l'échantillon.
- Mouvement simultané des sections dossier et jambes avec 1 moteur ; il peut être mis en œuvre avec 2 à 5 moteurs selon la configuration souhaitée avec :
 - Moteur dédié pour le réglage indépendant des sections dossier et jambes (code accessoire AC12).
 - Colonne motorisée pour le réglage de la hauteur (code accessoire AC28/200).
 - Moteur dédié pour régler l'inclinaison de l'assise (code accessoire AC35/1 - AC35/2 - AC35/3).
 - Moteur dédié pour le réglage du repose-pieds (code accessoire AC13 - AC13/1) ; (consulter l'offre commerciale et le catalogue des accessoires).
- Deux coussins séparés : dossier, assise et jambes, fonctionnels pour : posture excellente, ergonomie et effet préventif des escarres.
- Le recouvrement est complètement amovible permettant une désinfection efficace et fonctionnelle pour réduire les infections croisées. Personnalisation de la couleur comme l'échantillon.
- Propriétés du recouvrement : antibactérien, ignifuge classe 11M, antifongique, écologique, sans latex/sans phtalates et résistant.
- Mouvement des accoudoirs solidaire du dossier.
- Configurable avec de nombreux accessoires fonctionnels et exclusifs (consulter le catalogue d'accessoires).
- Excellente posture ergonomique avec effet préventif des escarres.
- Système de freinage utile à garantir stabilité au dispositif.
- Dispositif pouvant être désinfecté avec des dispositifs médico-chirurgicaux et des détergents couramment utilisés.
- Accoudoir exclusif à réglage multiple.
- Portée maximum 200 kg

**LES COUSSINS SONT COMPLÈTEMENT AMOVIBLES POUR FACILITER
LES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION DU DISPOSITIF.
LA TABLE HPL EST EXEMPTÉ DE POROSITÉ ET DE POINTS D'ACCUMULATION.**



Voulez-vous modifier le recouvrement ou le châssis ?

Encadrer ou cliquer sur le code QR et découvrir comment personnaliser le dispositif en consultant notre fiche couleurs.

Équipements de série

- Châssis en acier peint avec des poudres thermodurcissables
 - Table divisée en 3 sections : dossier, assise et jambes.
 - Mouvement simultané des sections dossier et jambes avec 1 moteur.
 - Position de trendelenburg 10° (alternativement en position de choc).
 - Appui-tête solidaire du dossier.
 - Accoudoirs solidaires du mouvement du dossier, amovibles, avec fonction de rotation, inclinables haut/bas, rabattables à 90° ; (consulter le catalogue d'accessoires pour d'autres types d'accoudoirs).
 - 4 roues durables, antistatiques, inoxydables, pivotantes Ø 100 mm.
 - Frein simultané roues arrière en acier galvanisé - Code fourniture AC7PIG.
 - Tous les mouvements du fauteuil sont commandés par une télécommande sur le périmètre équipée d'un câble spiralé de 3,5 m. La télécommande est facile à utiliser car elle est réalisée avec de grands pictogrammes en relief et convient également aux patients malvoyants. La télécommande est équipée de 10 touches avec 2 mémoires.
- Pour la sécurité des patients, la télécommande est équipée d'une clé d'inhibition des commandes - Code fourniture AC34P. Isolation IP66.
- Support télécommande bilatérale - Code fourniture AC25P.
 - Couverture en ABS pour base - Code fourniture AC83.
 - Couverture en ABS pour assise - Code fourniture AC84.
 - Coussins en mousse souple indépendants et facilement amovibles pour la section. assise/jambes
 - Recouvrement en similicuir de classe 11M, matériau pouvant être désinfecté avec des détergents couramment utilisés et des dispositifs médico-chirurgicaux, aux propriétés antibactériennes, antifongiques et résistant aux taches. Personnalisation de la couleur sur demande - Code fourniture AC87/1.



**TÉLÉCOMMANDE À 10 TOUCHES
AVEC 2 MÉMOIRES**

Mouvement des accoudoirs



ROTATION



INCLINABLES



RABATTABLES



SOLIDAIRES DU DOSSIER

Mouvements





TRENDELENBURG



POSITION INCLINABLE



Tableau des dimensions

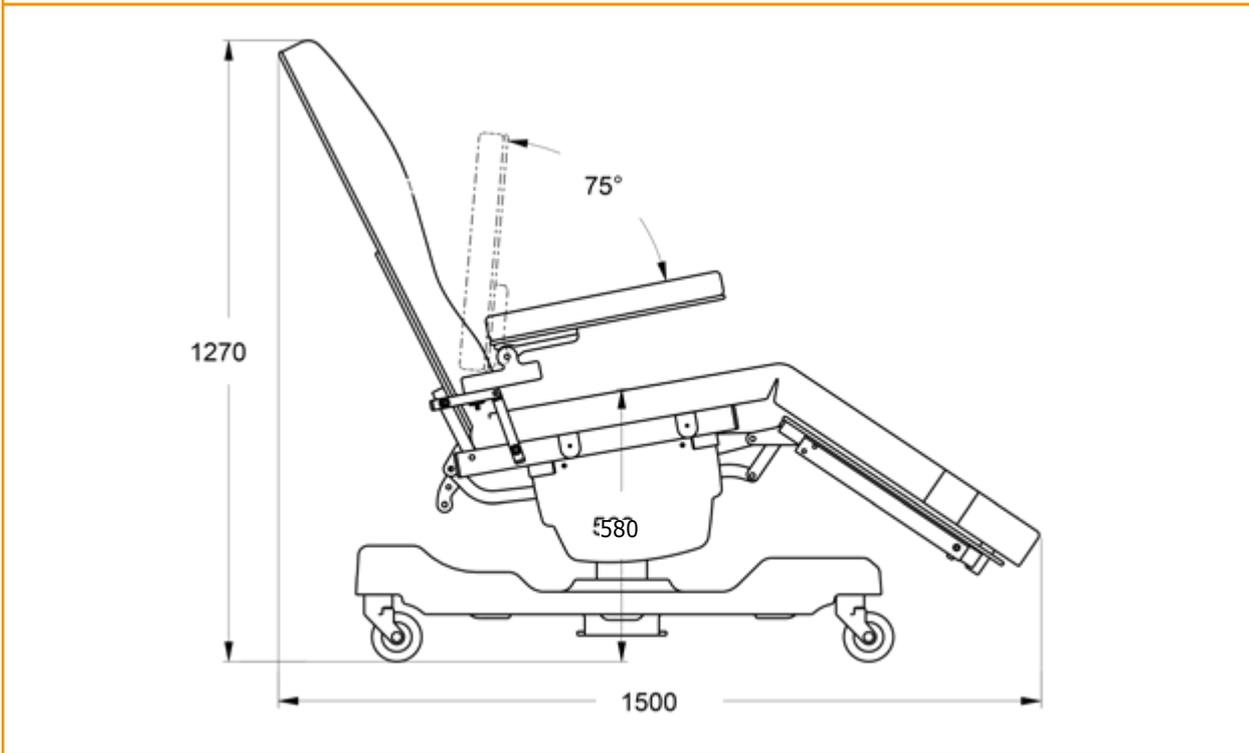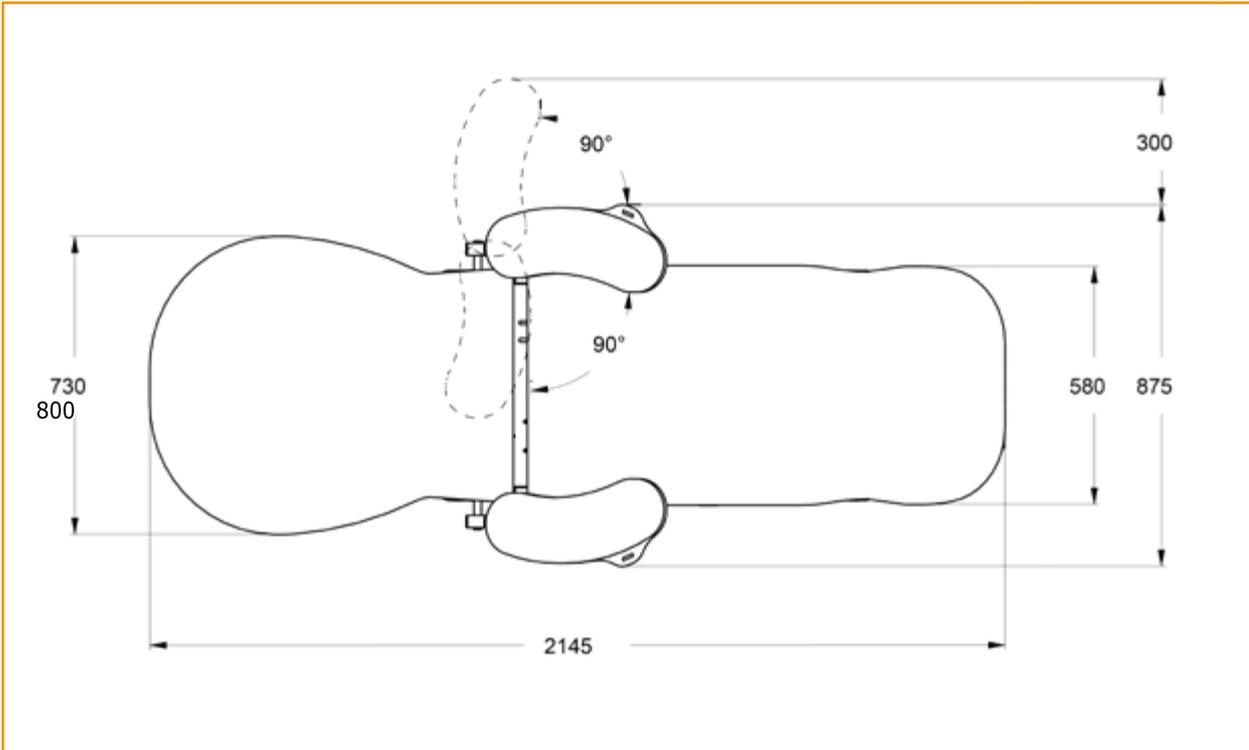

CORDON PRINCIPAL



Type F - Schuko



Type L - 16A



Type I - Australie

Type B - Canada et
USA

Type G - UK plug

Fiche technique



Code CND	Z129008
N° progressif/R	309862/R
Code Produit	GB0003.SP Acier peint GB0003.SS Acier inox
Utilisation prévue	Fauteuil multifonctionnel
Producteur	GARDHEN BILANCE SRL
Poids total	70 kg
Roues	4 roues inoxydables pivotantes de 100 mm avec système de freinage
Alimentation	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Moteurs électriques	Basse tension (24 V)
Absorption max	4A
Isolation	IP44
Portée maximum	200 kg
Charge de travail sûre	235 kg
Angle du dossier	76° (personnalisé sur demande)
Angle des jambes	45° (personnalisé sur demande)

Pour les certifications, se référer à ce qui est spécifié dans la section « Certifications et Système Qualité »

Les images reproduites dans cette fiche sont purement indicatives. Le fabricant a le droit d'apporter des modifications aux projets sans préavis. Pour identifier les équipements de série et choisir d'éventuels composants complémentaires, se référer au catalogue d'accessoires et/ou aux propositions commerciales. En cas de données contradictoires, le contenu des propositions commerciales fait foi.

Dép.FR_71 rév. 06/07/2022

