

Physio 2.0

Lettino per fisioterapia e massaggi elettrico

LETTINI

Uso Frequente

Fisioterapia
Riabilitazione
Diagnostica
Clinica Medica

**DOUBLE
BACKREST**



Versione con componenti opzionali

- Portarotolo
- Foro Facciale

**VERSATILE &
SICURO**

MADE IN ITALY

supporto professionale per trattamenti medici



www.gardhenbalance.it

VERSATILE & SICURO

Il **lettino elettrico per fisioterapia e massaggi** è estremamente versatile grazie alla regolazione dei due schienali.

- **Schienale basso**, regolabile in positivo e negativo, su richiesta può essere dotato di foro facciale.
- **Schienale alto** per far assumere la posizioni di seduta.

Le varie possibilità di configurazione garantiscono massimo comfort al paziente durante la visita o altre procedure mediche.

SCHIENALE ALTO

Regolabile per far assumere la posizione di seduta

SCHIENALE BASSO

Regolabile per ottimizzare la postura del paziente.

**DOUBLE
BACKREST**

Dotazioni di serie

- Piano suddiviso in 3 sezioni - 2 snodi.
- Telaio rinforzato, realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti arricchite con antibatterico, personalizzazione del colore su richiesta.
- Schienale basso/gambale motorizzato.
- Schienale alto/gambale motorizzato.
- Trendelenburg motorizzato.
- Regolazione dell'altezza ottenuta con compassi a pantografo azionati elettricamente tramite pulsantiera. Altezza minima 510 mm, altezza massima 910 mm, con escursione di 400 mm.
- Pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5m, La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti; Isolamento IP66.
- Supporto per pulsantiera.
- 4 ruote piroettanti con freno (Ø 125 mm), antitraccia, bassa resistenza al rotolamento, alta silenziosità, scorrevoli su cuscinetti e ad elevata capacità. Ciascuna ruota è dotata di apposito freno azionabile mediante leva a pedale.
- Imbottitura realizzata in resina espansa ad alta densità.
- Rivestimento in similpelle classe 11M, materiale sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.

Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.

*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

Rivestimento
Similpelle

Rivestimento
Siliconico

Telaio




Vuoi implementare il dispositivo?

Inquadra il QR code e scopri tutti i componenti opzionali disponibili consultando il catalogo.

Movimentazioni

Altezza variabile elettrica

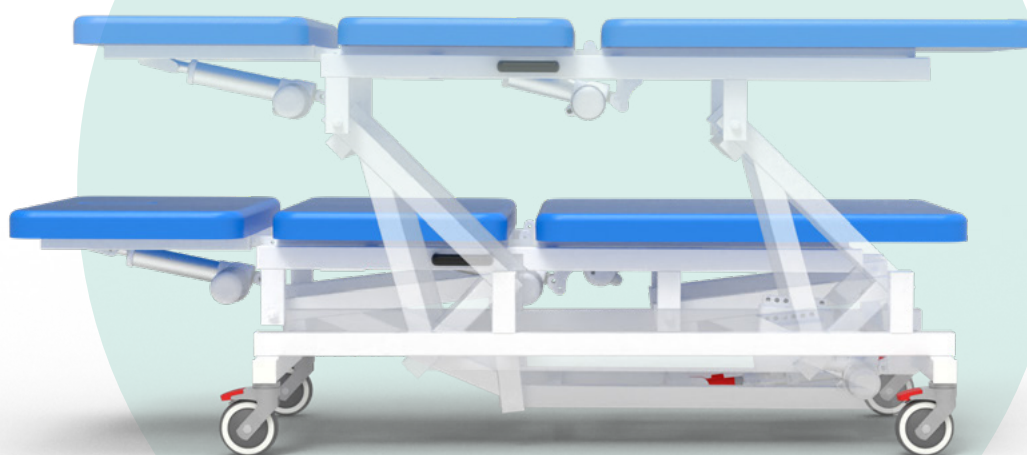


La regolazione dell'altezza variabile è comandata tramite:



Pulsantiera

Movimentazioni

Regolazione schienale alto elettrico

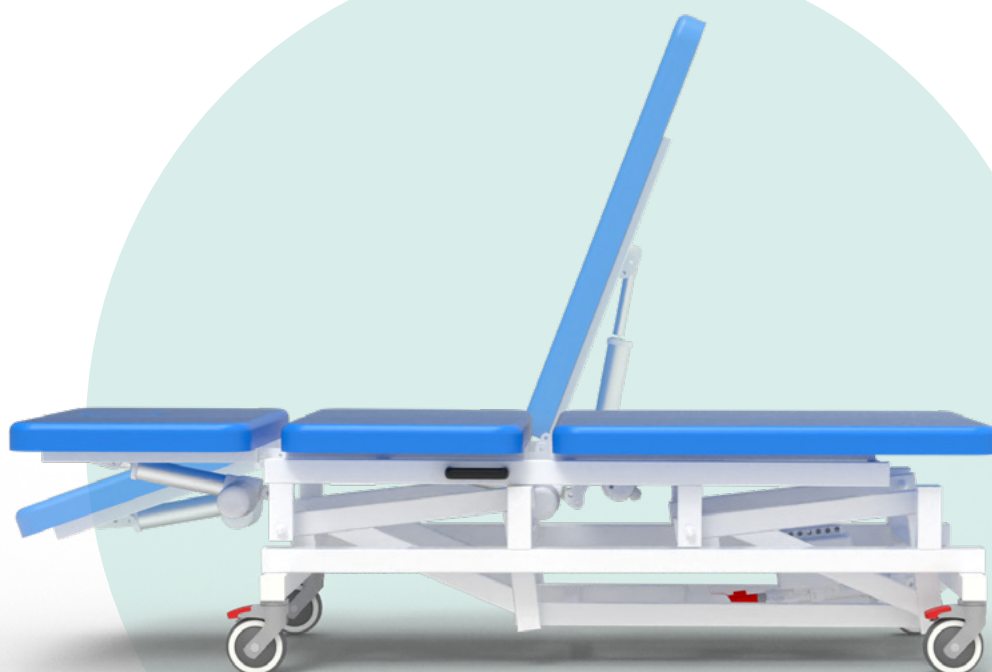


La regolazione dello schienale è comandato tramite:



Pulsantiera

Movimentazioni

Regolazione schienale basso elettrico

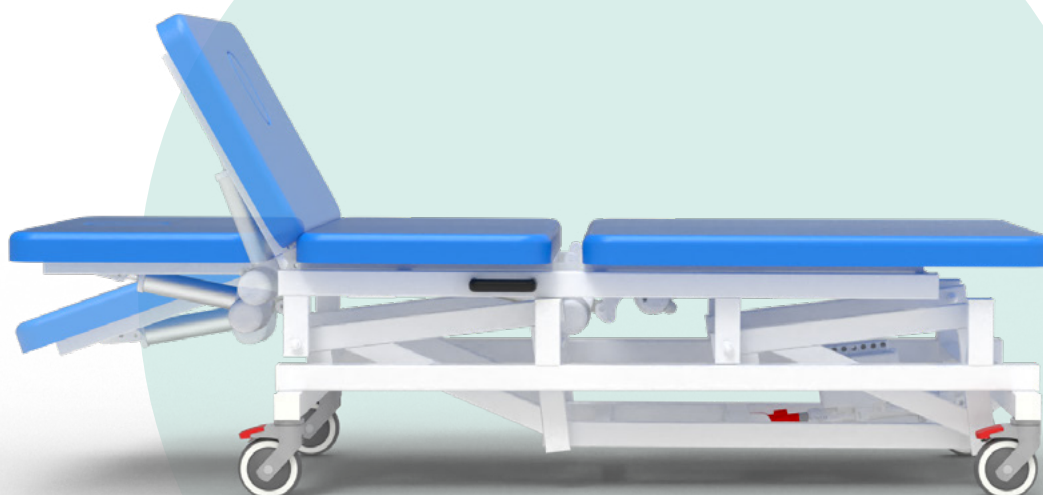

La regolazione dello schienale è comandato tramite:



Pulsantiera

Movimentazioni

Regolazione Trendelenburg elettrico




La regolazione dello schienale è comandato tramite:



Pulsantiera

Tabella dimensioni

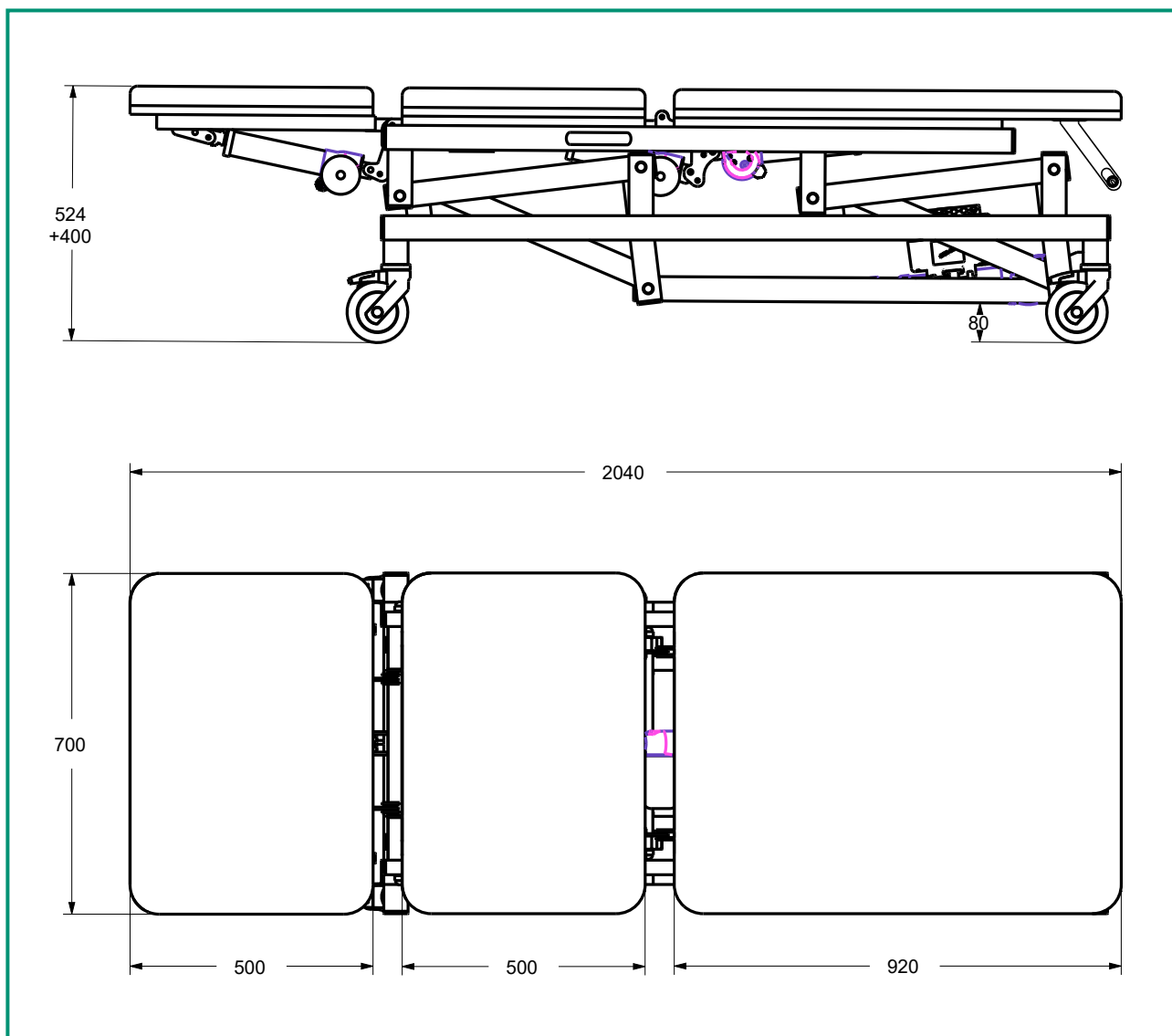

Tipologia cavo di alimentazione



**Tipo F
Schuko**



**Tipo L
16A**

Scheda tecnica

CND/EMDN	V080603
GMDN	34870
UDI-DI di base	805771740LVISKK
N. progressivo/R	2868637/R
Codice Prodotto	GB0441.SP
Destinazione d'uso	Lettino per fisioterapia/massaggi
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	70 kg
Tipologia di controllo	Pulsantiera
Ruote	Nr. 4 Ø 125 mm, inossidabili girevoli con sistema frenante
Alimentazione	Multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
Alimentazione con batterie	24v - 4.5A
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	180 kg
Carico di Lavoro Sicuro	215 kg

Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: info@gardhenbalance.it - PEC: gardhenbalance@pec.it

Visita il nostro sito **www.gardhenbalance.it** / Seguici su     

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità.

Dep. 426 rev 15/09/2025