

KIT 5010E

materasso a pressione alternata + compressore



MATERASSI
E GUANCIALI

Usò FrequentE

Degenza
Domiciliare
RSA
Pronto soccorso



● terapeutico &
INNOVATIVO ●
a pressione alternata



www.gardenbalance.it



KIT 5010E

Il Kit 5010E è un sistema professionale progettato per la prevenzione e il trattamento dei pazienti che presentano un rischio di sviluppare ulcere da decubito di livello da moderato a intensivo, stadio I, II, III. La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.

Copertura in Nylon PU con pulsante di biocompatibilità, lascia passare il vapore ed è Impermeabile con CA117. Livello ignifugo.


Gli elementi a lento rilascio d'aria tengono lontana l'umidità.

Pressione alternata

Funzione di alternanza. Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del sangue, prevenire o trattare le piaghe da decubito e ridurre così il dolore del paziente e il lavoro degli operatori.

Scheda tecnica

Codice	GBGI0002
COMPRESSORE:	
Dimensioni:	30 x 13,5 x h 11 cm
Pressione esercitata:	55-120 mmHg
Voltaggio:	220 V, 50 Hz
Fuoriuscita aria:	7-8 litri/min
Durata ciclo:	12 min
Materiale copertura:	ABS ignifugo TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2
MATERASSO:	
Dimensione totale:	198x86x12,8 cm
Alternanza	1 in 2 (gruppo A e B)
Altezza elementi:	12,8 cm (5")
Materiale copertura:	Nylon PU con bottone
Spessore:	0,4 mm
Materiale elementi:	nylon PVC
Portata:	150 kg

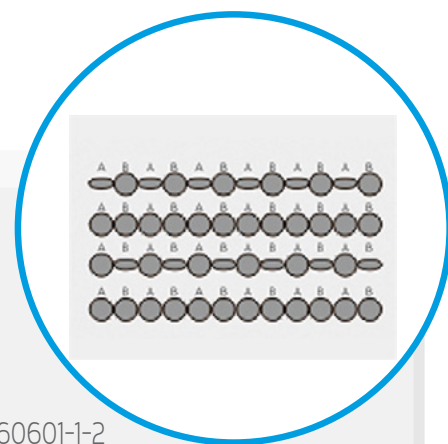

Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: info@gardhenbalance.it - PEC: gardhenbalance@pec.it

Visita il nostro sito www.gardhenbalance.it / Seguici su

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità.

Dep. 379 rev. 15/02/2024