

Posizionatore Gel Lastra Corpo



POSIZIONATORI IN GEL


Uso frequente

Pronto Soccorso


Chirurgia Generale

Terapia Intensiva

Sala Parto

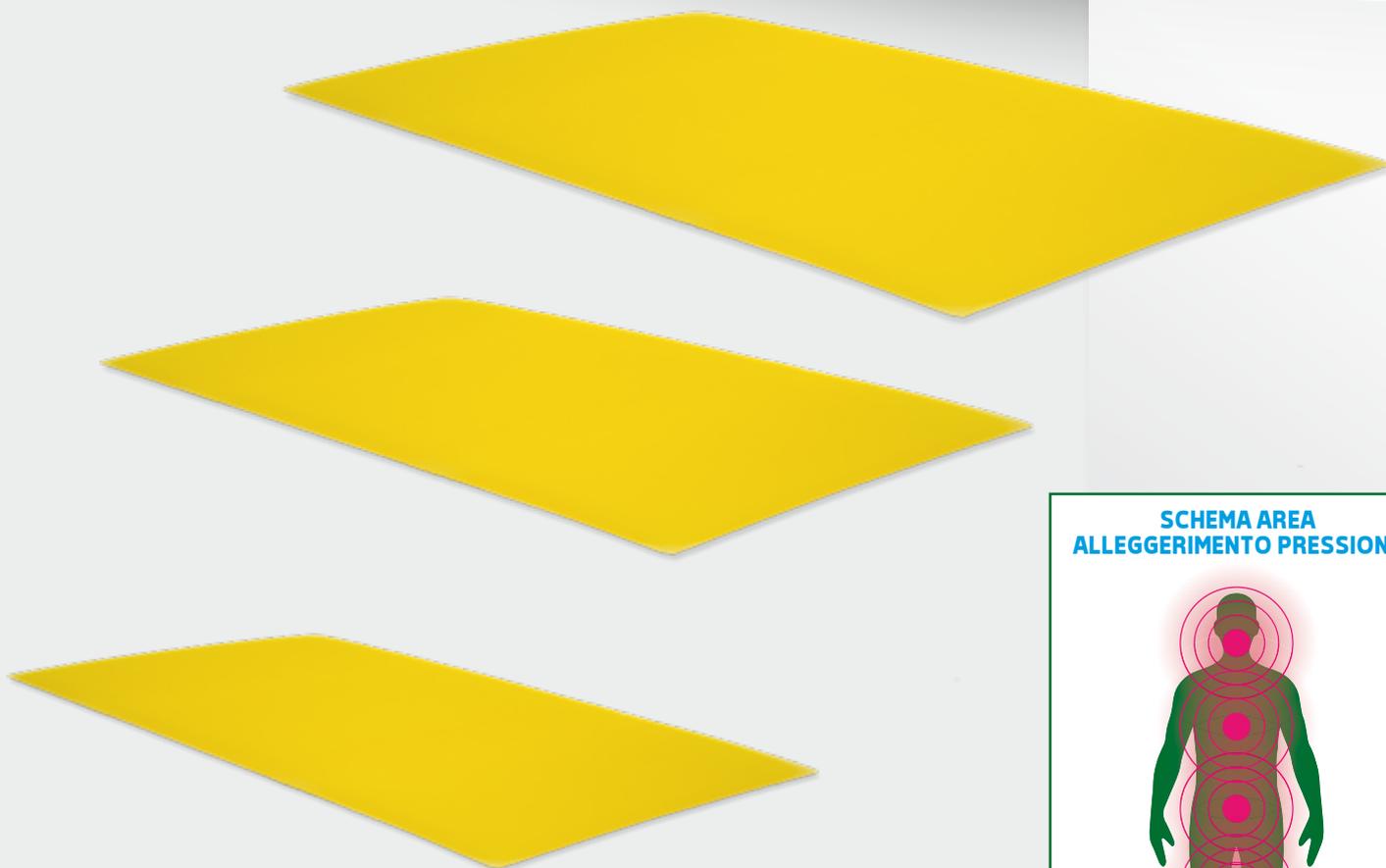

SCHEMA AREA ALLEGGERIMENTO PRESSIONE

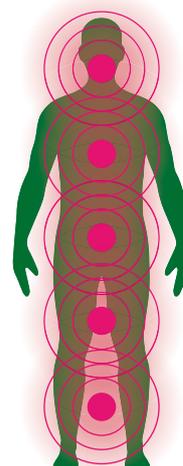

Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l'accomodamento del paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l'operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati involontariamente e inconsapevolmente dal personale socio-sanitario: attriti, sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

È dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente nella giusta posizione per tutta la durata dell'intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente progettati per prevenire l'insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

I posizionatori in gel possono essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria e riutilizzati.

Il posizionatore in gel lastra corpo riduce la pressione distribuendo il peso uniformemente sull'intera superficie del tavolo operatorio.

Il colore del gel utilizzato per la realizzazione è secondo disponibilità.

Vantaggi

- Efficacia nel prevenire abrasioni
- Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
- Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
- Realizzato con disegno ergonomico
- Sanificabile e riutilizzabile

Caratteristiche

- Radiotrasparente
- Non conduttivo
- GEL di poliuretano
- Rivestimento esterno in poliuretano
- Latex Free
- Antibatterico

Dimensioni

Cod. Prodotto	N. Progressivo/R	UDI-DI di Base	Dimensione
GBSK0013	2245429/R	08809240020685	L.1600 x P.500x H.13 mm
GBSK0014	2245431/R	08809240020692	L.1830 x P.500 x H.13 mm
GBSK0016	2245434/R	08809240029060	L.840 x P.500 x H.13 mm

Scheda tecnica

Codice CND	V080302
Destinazione d'uso	Posizionatore Gel
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Classe di Dispositivo	Classe I

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 285 rev. 09/12/2022

