

Stephen

Poltrona polifunzionale



POLTRONE

Uso Frequente

Chemioterapia
Terapia infusionale
Day Hospital
Donazione sangue
Prelievi
Pronto soccorso
Dialisi
Trasporto pazienti
Dermatologia/Cosmetica
Polifunzionali

NOVITÀ

elevato
COMFORT


Terapia ospedaliera e ambulatoriale



www.gardhenbalance.it



**Freno
simultaneo
ruote posteriori**

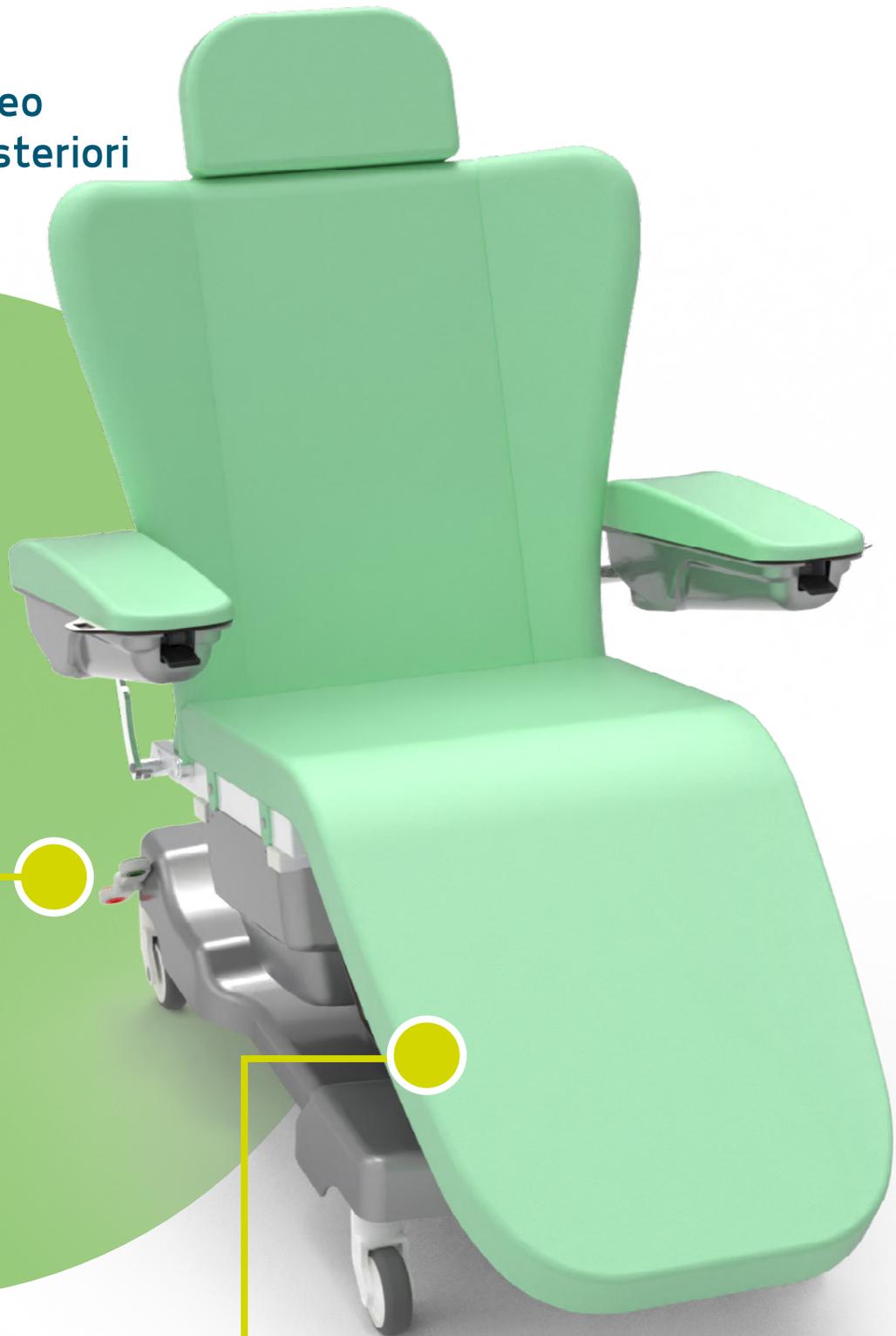

**Cuscino unico
seduta/gambe**



NOVITÀ

dotazioni di serie

**Braccioli ergonomici
servoassistiti
regolabili dal paziente**



Ribaltabili



Inclinabili



Girevoli





Stephen


Movimentazioni

Sezioni schienale e gambale indipendenti

Le movimentazioni delle sezioni schienale e gambale indipendenti sono comandate grazie ai tasti dedicati presenti sulla pulsantiera.


Attivazione tramite

Pulsantiera

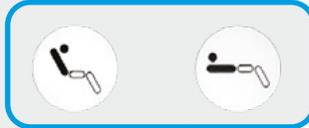

Movimentazioni simultanee

delle sezioni schienale e gambale sono comandate grazie ai tasti di memoria presenti sulla pulsantiera

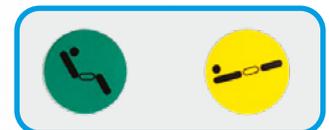



Movimentazioni

Trendelenburg

La posizione di Trendelenburg è ottenibile al tasto dedicato presente sulla pulsantiera.

Attivazione tramite

Pulsantiera



Posizione Recliner

Altro esempio di movimentazione





Altre caratteristiche del dispositivo medico

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti.
- Piano suddiviso in 4 sezioni: poggiatesta, schienale, seduta e gambe.
- Movimentazioni indipendenti e/o simultanee delle sezioni schienale e gambe - Codice dotazione AC12
- Posizione di trendelenburg.
- Poggiatesta solidale allo schienale.
- Braccioli ergonomici servoassistiti (codice dotazione AC30/C6) regolabili dal paziente con funzioni di:
 - ribaltamento a 90°;
 - rotazione;
 - inclinazione.
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100mm.
- Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato - Codice dotazione AC7PIG.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie.
Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
- Supporto pulsantiera bilaterale - Codice dotazione AC25P.
- Cover in ABS per base - Codice dotazione AC83.
- Cover in ABS per seduta - Codice dotazione AC84.
- Cuscini soft foam indipendenti facilmente asportabili.
- Rivestimento similpelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1IM.
Codice dotazione AC87/1.

Vuoi modificare il colore del rivestimento e del telaio?

Inquadra o clicca i QR code e scopri come personalizzare il dispositivo consultando le nostre schede colori*.

*Qualora non venisse espressa alcuna preferenza il dispositivo sarà fornito con il colore disponibile.

Rivestimento
Similpelle

Rivestimento
Siliconico

Telaio



Vuoi implementare il dispositivo?

Inquadra il QR code e scopri tutti i componenti opzionali disponibili consultando il catalogo.



Scheda tecnica

Codice CND/EMDN	V08020101
GMDN Code	38447
N. progressivo/R	2683443/R
UDI-DI di Base	805771740POLPE
Codice Prodotto	GB0416.SP
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso del dispositivo	70 kg
Tipologia di controllo	Display Touch Screen - Pulsantiera
Peso totale	70 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	200 kg
Carico di Lavoro Sicuro	235 kg
Conformità	Regolamento UE 2017/745

Tipologia cavo di alimentazione



Type F - Schuko




Type L - 16A



Stephen

Tabella dimensioni

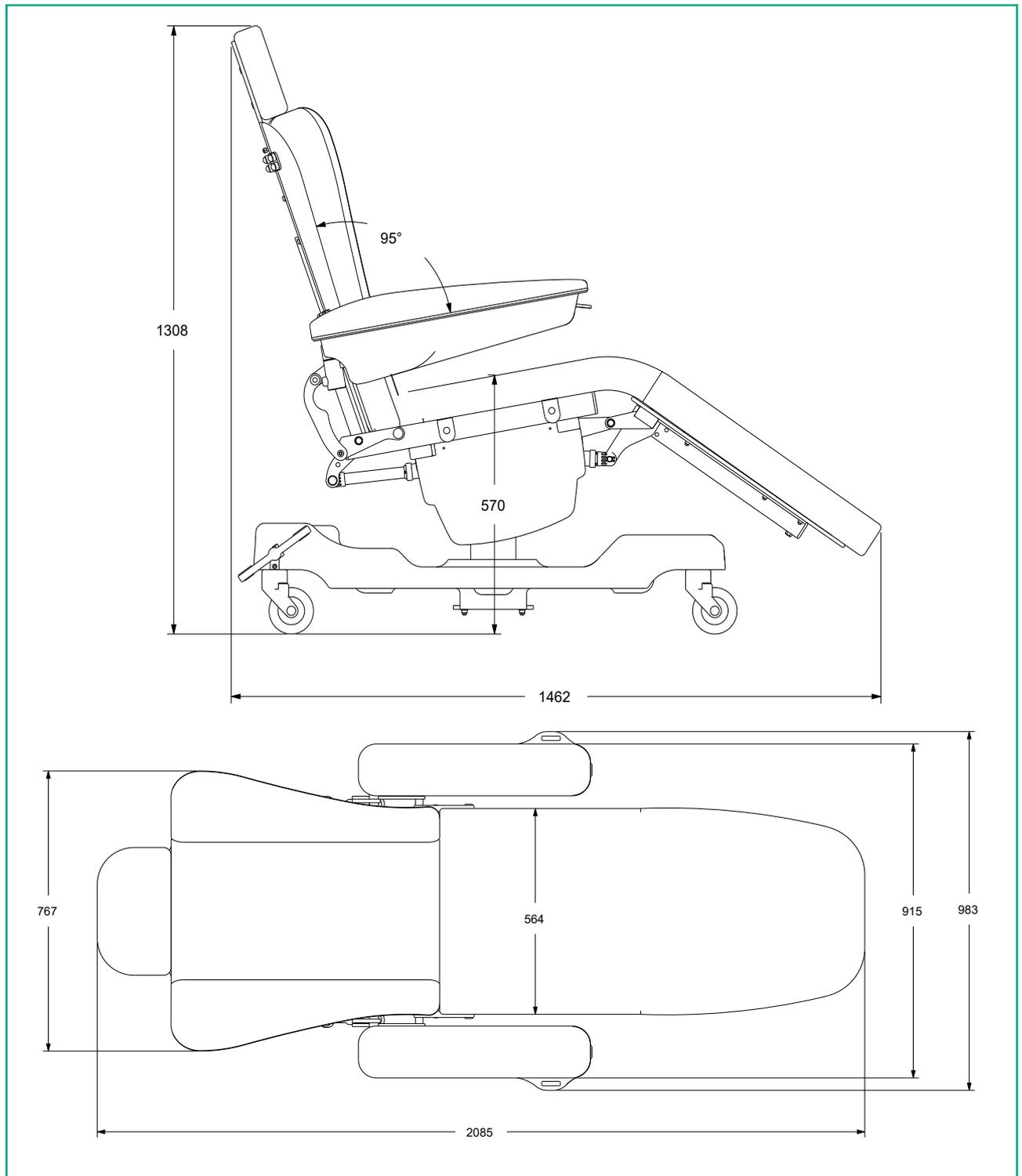

Gardhen Balance S.r.l.

Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

Tel. +39.081.8692160 pbx - Fax +39.081.8692460

E-mail: info@gardhenbalance.it - PEC: gardhenbalance@pec.it

Visita il nostro sito www.gardhenbalance.it / Seguici su



Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo componenti opzionali e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure.

Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità.

Dep. 363 rev. 21/10/2024

